


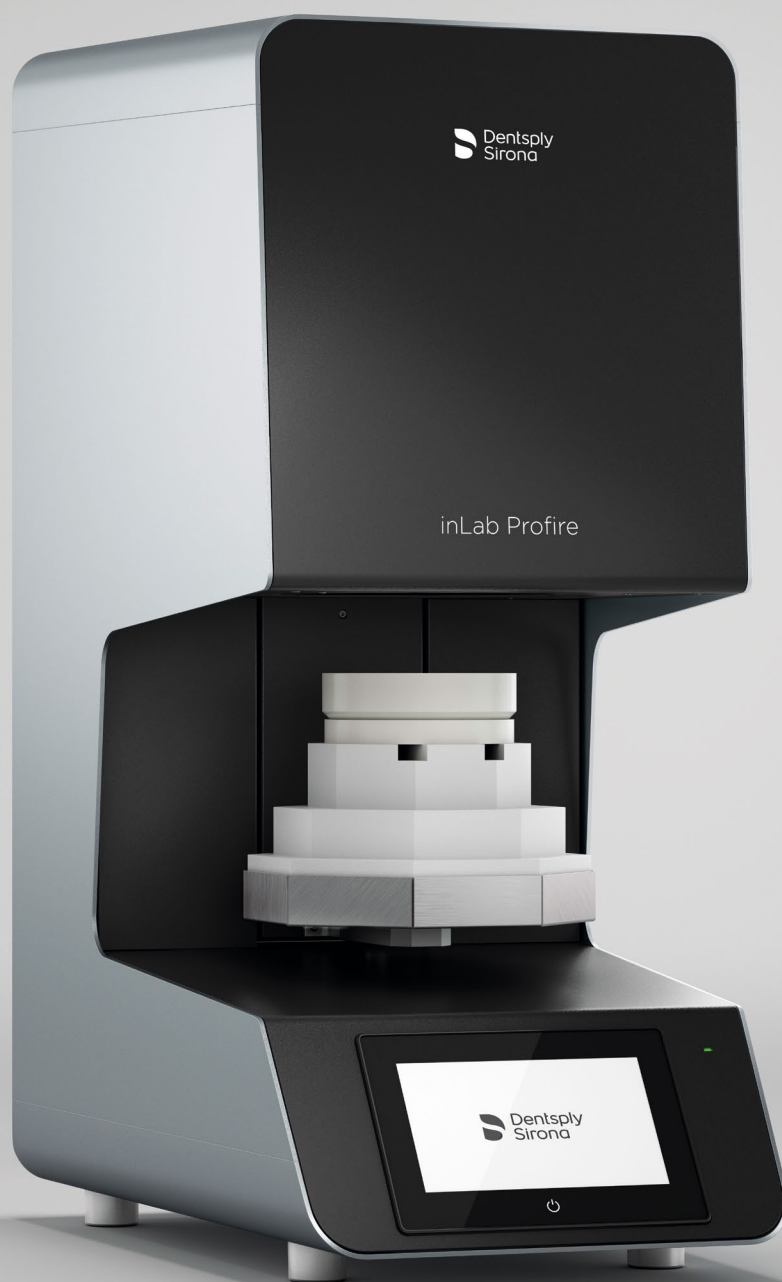

 inLab Profire – Forno de Sinterização

Processo seguro para o
Laboratório de Prótese

inLab Profire

Tecnologia de processo comprovada e melhorada

O novo forno inLab Profire para restaurações de óxido de zircônio integra processos tecnológicos comprovados com um novo design; melhoras que aperfeiçoam os processos de maneira segura e a reprodutibilidade das sinterizações finais.

Elementos de aquecimento de alta qualidade foram testados em processos de longo prazo, bem como a distribuição homogênea de calor no interior da câmara do forno, que propiciam um controle de temperatura preciso durante todo o processo para uma sinterização de alta qualidade e resultados de reprodutibilidade.

A nova e bem organizada tela de toque propicia grande conforto ao usuário, o que possibilita uma utilização mais rápida e simples. A interface do usuário foi redesenhada para apresentar de forma clara o status do programa e as opções de interação.

NOVO PROGRAMA 27°C 10:08

#	t	°C	⌚
S1	120	800	8
S2	100	1200	5
S3	111	1550	15
S4	120	750	0


1 2 3
4 5 6
7 8 9
, 0 C
←

← ≡ →

Programação simples e clara dos parâmetros.



Visualização dos processos com a possibilidade de ativação de pré-secagem, ajuste de parâmetros de processos, programação da função de Início Automático (Auto-Start) e apresentação do tempo de processo.

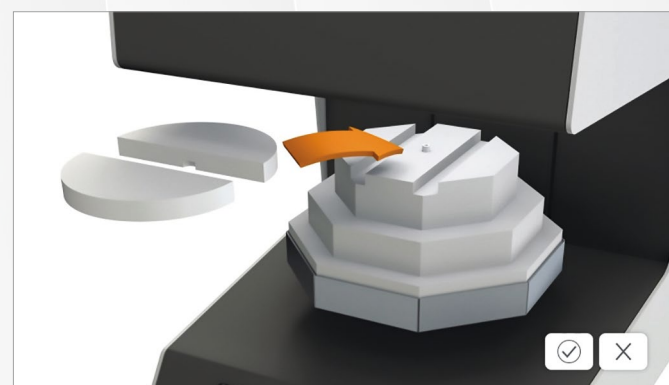

Possibilita ao usuário uma troca rápida de base durante cada mudança de material.



Poderoso

- Processos de longo prazo de sinterização de óxido de zircônio.
- Sinterização Rápida (Speed) de restaurações unitárias, estruturas e pontes.
- "Secagem & Sinterização" – Sinterização com Pré-Secagem que pode ser facilmente ativado antes do início de cada processo.

Economia de Tempo

- Alta taxa de elevação (até 120°C/min).
- Programação de Início Automático (AutoStart).
- Sinterização simultânea de até 60 elementos* quando se utiliza duas bases de sinterização.

Confiável

- Pré-Programado para materiais validados da Dentsply Sirona.
- Programas livres opcionais para a programação de sinterização de óxido de zircônio de longo tempo e rápida.

Flexível

- Troca rápida e fácil entre processos de sinterização de óxido de zircônio.

*Para óxido de zircônio; dependendo do tamanho das restaurações e dos suportes

inLab Profire

Um forno. Várias possibilidades.

Processos coordenados para
excelentes resultados em óxido de zircônio

O forno inLab Profire apresenta programas predefinidos de sinterização que foram validados cuidadosamente seguindo os requerimentos dos materiais; como resultado, estes podem ser iniciados com a seleção direta do programa.



Fácil, limpo e rápido

- Alta qualidade do material graças à sua estrutura homogênea.
- Contração compatível.
- Sem deformação ou bolhas.



inLab Profire sob um olhar

Alta velocidade
de aquecimento
(máx. 120 °C/min.)

O design moderno
e enxuto corresponde
ao do sistema inLab

Opção de adição de
novos programas na
porta USB

Guia do Usuário claro e intuitivo
para todos os recursos



inLab Profire	
Dimensões (L x P x A)	360 mm x 534 mm x 780 mm
Peso	aprox. 65 kg
Alimentação	200-240 V
Frequência	50/60 Hz
Capacidade Nominal	3500 W
Temperatura máxima de sinterização	1,650°C

inLab Profire	
Acessórios	• Esferas de sinterização para Zircônio • Suporte de sinterização rápida para Zircônio • Suporte de bandeja • Garfo do suporte
Tipos de Programas	• Rápido (Speed) • Sinterização convencional • Pré-Secagem e sinterização rápida (Speed) • Programa de serviço • Recurso de inicialização automática



Dentsply Sirona Brasil

Edifício HD873 - R. Henri Dunant, 873 - Conjunto 101
Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04709-110
www.dentsplysirona.com/pt-br

🏢 Sirona Dental Systems GmbH – Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemanha.

Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 863 – Unidade 63 CD 02, Distrito Industrial – CEP 88104-785 – São José/SC – CNPJ 12.483.930/0001-22 – dentsplysirona.com – SAC: 0800 771 2226 | 11 3046-2222. Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo – CRF-SC: 8326. inLab Profire – Isento de Registro pelo Ministério da Saúde.

