



inLab Profire – Forno de Sinterização

Processo seguro para o Laboratório de Prótese

inLab Profire

Tecnologia de processo comprovada e melhorada

O novo forno inLab Profire, para restaurações de óxido de zircônia, integra processos tecnológicos comprovados com um novo design; melhoras que aperfeiçoam os processos de maneira segura e a reprodutibilidade das sinterizações finais.

Elementos de aquecimento de alta qualidade foram testados em processos de longo prazo, bem como a distribuição homogênea de calor no interior da câmara do forno, que propiciam um controle de temperatura preciso durante todo o processo para uma sinterização de alta qualidade e resultados de reprodutibilidade.


A nova e bem organizada tela de toque propicia grande conforto ao usuário, que possibilita uma utilização mais rápida e simples. A interface do usuário foi redesenhada para apresentar de forma clara o status do programa e as opções de interação.



Programação simples e clara dos parâmetros.



Visualização dos processos com a possibilidade de ativação de pré-secagem, ajuste de parâmetros de processos, programação da função de Início Automático (AutoStart) e apresentação do tempo de processo.

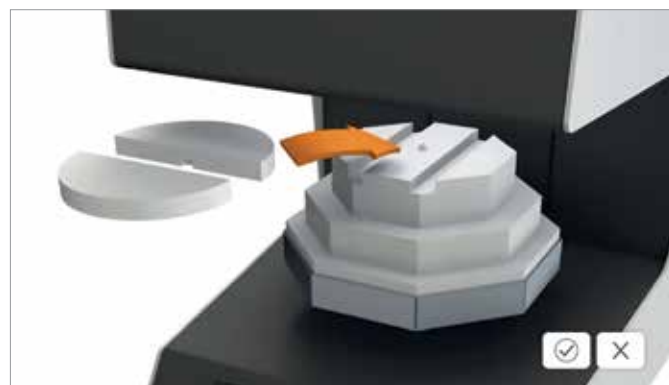

Possibilita ao usuário uma troca rápida de base durante cada mudança de material.



Poderoso

- Processos de longo prazo de sinterização de óxido de zircônio
- Sinterização Rápida (Speed) de restaurações unitárias, estruturas e pontes
- “Secagem & Sinterização” – Sinterização com Pré-Secagem que pode ser facilmente ativado antes do início de cada processo

Economia de Tempo

- Alta taxa de elevação (até 120° C/min)
- Programação de Início Automático (AutoStart)
- Sinterização simultânea de até 60 elementos* quando se utiliza duas bases de sinterização

Confiável

- Pré-Programado para materiais validados da Dentsply Sirona
- Programas livres opcionais para a programação de sinterização de óxido de zircônio de longo tempo e rápida

Flexível

- Troca rápida e fácil entre processos de sinterização de óxido de zircônio

*Para óxido de zircônio; dependendo do tamanho das restaurações e dos suportes.

inLab Profire

Um forno. Várias possibilidades.

Processos coordenados para
excelentes resultados em óxido de zircônio

O forno inLab Profire apresenta programas predefinidos de sinterização que foram validados cuidadosamente seguindo os requerimentos dos materiais; como resultado, estes podem ser iniciados com a seleção direta do programa.



Fácil, limpo e rápido

- Alta qualidade do material graças a sua estrutura homogênea
- Contração compatível
- Sem deformação ou bolhas

inLab Profire sob um olhar

Alta velocidade
de aquecimento
(até 120° C/min)

O design moderno e
enxuto corresponde ao
sistema inLab

Opção de adição de
novos programas na
porta USB

Guia do Usuário claro e intuitivo
para todos os recursos

inLab Profire	
Dimensões (L x P x A)	360 mm x 534 mm x 780 mm
Peso	aprox. 65 kg
Alimentação	200-240 V
Frequência	50/60 Hz
Capacidade Nominal	3500 W
Temperatura máxima de sinterização	1,650°C

inLab Profire	
Acessórios	• Esferas de sinterização para zircônio • Suporte de sinterização rápida para zircônio • Suporte de bandeja • Garfo do suporte
Tipos de Programas	• Rápido (Speed) • Sinterização convencional • Pré-Secagem e sinterização rápida (Speed) • Programa de serviço • Recurso de inicialização automática

Dentsply Sirona Brasil

R. Henri Dunant, 873, conjunto 101 - Chácara Santo Antônio,
Zona Sul, São Paulo - SP, 04709-110.
dentsplysirona.com

🏢 Sirona Dental Systems GmbH - Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemanha.

Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 863 - Unidade 63 CD 02, Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José/SC - CNPJ 12.483.930/0001-22 - dentsplysirona.com - SAC: 0800 771 2226 | 11 3046-2222. Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo - CRF-SC: 8326. inLab Profire - Isento de Registro pelo Ministério da Saúde.