




+
**WE
KNOW
ENDO.**



Propex Pixi®

O localizador que cabe no seu bolso.

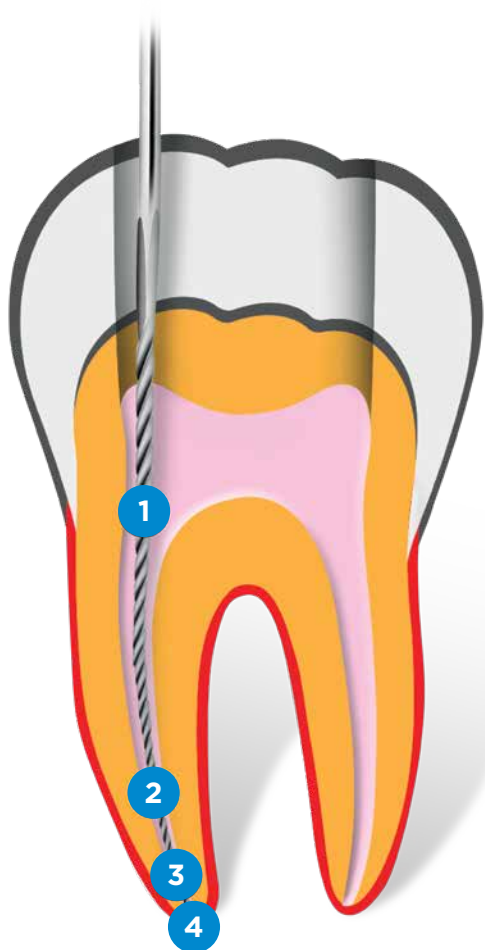

Atenção: A escala «2.0» a «0.0» não representa a distância em mm – indica a progressão da lima em direção ao ápice.

Propex Pixi Cód.: 12.33.213.0000

Conteúdo: 1 cabo de medição longo, 1 gancho de ligação, 2 clips labiais e 1 carregador universal

Pequeno no tamanho. Grande nos benefícios.

- Compacto: ocupa espaço mínimo durante o tratamento e facilita seu transporte e armazenamento
- Preciso: acuracidade comprovada

Controle e conforto

- Tecnologia multifrequência para localização foraminal
- Funciona em canais úmidos ou secos
- Não necessita de calibragem prévia

Veja e escute

- Duplo controle de progressão da lima
- Controle visual e progressivo do som com 4 níveis de volume

1

A lima é inserida no canal
1 sinal duplo



2

A lima encontra-se na zona pré-apical
«2.0» a «1.5»
sinal intermitente



3

Zona apical
«1.0» a «0.0»
APEX «0.0»
sinal contínuo



4

OVER
A lima ultrapassou o ápice
sinal intermitente rápido



Maillefer Instruments Holding S.à.r.l. Chemin du Verger 3 CH-1338 Ballaigues, Suíça.
Importado e distribuído por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP - Brasil - CNPJ 31.116.239/0001-55.
SAC: 0800 771 2226 - Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396.
Registro ANVISA nº 80196889036 (Localizador de Apice - Equipamento Odontológico).



<http://www.dentsply.com.br/bulas/diretory/p/propex-pixi.pdf>



**Dentsply
Sirona**
Endodontics