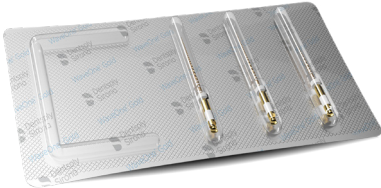
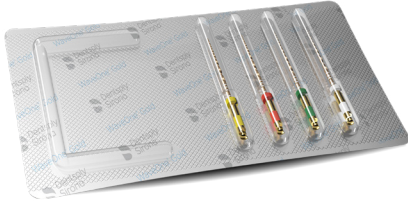


QUANDO INDICAR ↓ PERFIL ↓ PROBLEMA/DESEJO	Solução WaveOne® Gold a combinação perfeita para preparo do canal de forma simples e eficiente		
	É um usuário de instrumentos manuais ?		
	Gostaria de evoluir para instrumentação mecanizada ?		
INDICAÇÃO	Pré-alargamento	Instrumentação	Obturação
FOTO DO PRODUTO			
MARCA	WaveOne® Gold Glider	WaveOne® Gold	WaveOne® Gold Conform Fit™ Gutta-Percha
MOVIMENTO	 Reciprocante	 Reciprocante	
ARGUMENTO ECONÔMICO	Lima única	Lima única: 1 lima para a maioria dos casos	Cone único com adaptação perfeita
	WaveOne Gold Glider + WaveOne Gold = eficiência e simplicidade em perfeita harmonia	WaveOne Gold é o sistema reciprocante de lima única, para profissionais em busca de simplicidade, confiança e excelência.	Sistema Completo: do pré-alargamento e preparo à obturação
ARGUMENTO CLÍNICO	O instrumento WaveOne Gold Glider é indicado para a etapa de pré-alargamento da solução W1G, ideal para profissionais em busca de eficiência, simplicidade e segurança, além de redução do tempo de preparo.	Apenas 1 instrumento para preparo do canal, mesmo em casos mais complexos devido ao tratamento térmico GOLD, que lhe confere alta flexibilidade, respeito à anatomia e resistência à fratura.	O cone de Guta Percha WaveOne Gold foi desenvolvido para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados para o sistema WaveOne Gold, que possui conicidades variadas. Deve ser utilizado em conjunto com um cimento endodôntico obturador. Indicamos o AH Plus.
CONFIGURAÇÃO NO MOTOR	Deve ser usada na configuração reciprocante WaveOne Gold		
SECÇÃO	Transversal em paralelograma 	Transversal em paralelograma 	
CONICIDADES	- Comprimentos 21, 25 e 31mm - Ponta 015 - Conicidades variadas no mesmo instrumento taper de 2% a 6% - Parte ativa 16mm	- Comprimentos 21, 25 e 31mm - Parte ativa 16mm - Conicidades variadas no mesmo instrumento e ponta com 4 tamanhos: Small 020/.07 ; Primary 025/.07; Medium 035/.06; Large 045/.05;	Adaptação perfeita ao canal, conicidades variadas idênticas aos instrumentos com identificação através das cores.
BENEFÍCIOS	1. Maior flexibilidade, resistência e respeito à anatomia do canal 2. Pode ser utilizada em qualquer motor endodôntico na configuração reciprocante. 3. Redução do tempo de trabalho	1. Segurança: maior flexibilidade, eficiência de corte e resitência. Graças ao design diferenciado e tratamento térmico Gold exclusivo 2. Simplicidade: redução do tempo de trabalho (1 lima para a maioria dos casos) 3. Técnica de fácil aprendizado 4. Motor X-Smart Plus já vem com o sistema cadastrado, não sendo necessário configurá-lo	1. Fácil identificação dos tamanhos através da combinação de cores iguais aos instrumentos 2. Ajuste preciso e sensível com adaptação perfeita ao taper 3. Fluxo de preparo e obturação aprimorados até a finalização 4. Simplicidade de uma solução completa 5. Mais segurança ao paciente 6. Aba conveniente e marcações de cores para rápida identificação

MAILLEFER

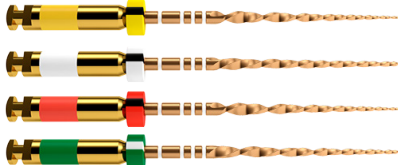
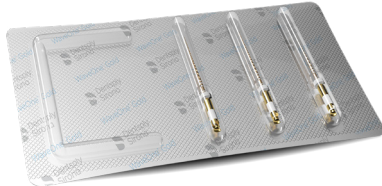
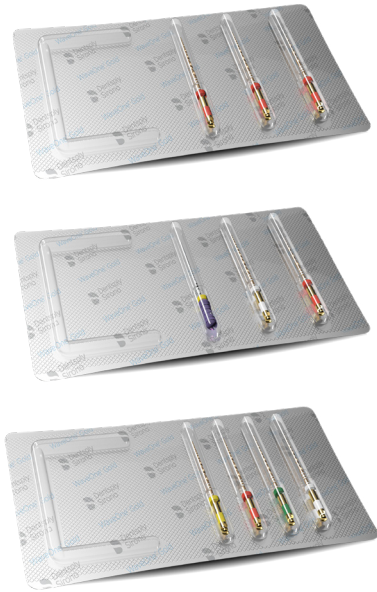
Argumento de vendas

WaveOne® Gold



**WE
KNOW
ENDO.**

130 YEARS

MARCA	WaveOne® Gold Glider	WaveOne® Gold	WaveOne® Gold Conform Fit™ Gutta-Percha
INSTRUMENTO			
APRESENTAÇÕES DISPONÍVEIS NO BRASIL:	Blister com 3 limas nos comprimentos 21, 25 e 31mm	Blister individual com 3 limas ou com 4 limas sortidas, nos comprimentos 21, 25 e 31mm e tamanhos: Small, Primary, Medium e Large. Blister sequência econômico com 1 lima K10; 1 lima *W1G Glider e 1 lima **W1G todos de 25mm	Caixa com 60 pontas nos tamanhos Small, Primary, Medium e Large (conforme cores dos instrumentos)
			

*W1G Glider = WaveOne Gold Glider

**W1G = WaveOne Gold

1100-PIR-ARTE 0976 - Rev00